


설치부터 관리까지

멕 헬스케어 드림스테이션 가이드북



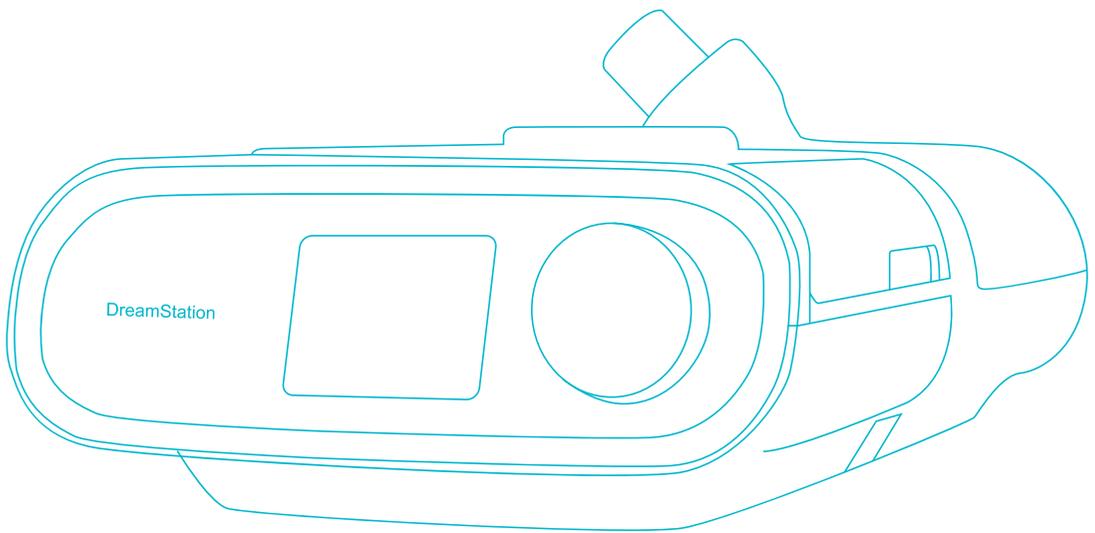


DreamStation

사용자의 편의성을 위한 디자인과 적은 소음

지속형
자동형
이중형
(제조사: 필립스 / 제조국: 미국)

양압기 치료

양압기 치료는 지속적으로 공기를 공급하여 좁아진 기도를 넓혀주고 유지시켜 줍니다. 약물이나 수술 없이 수면무호흡증을 치료할 수 있는 가장 효과적인 치료법입니다.

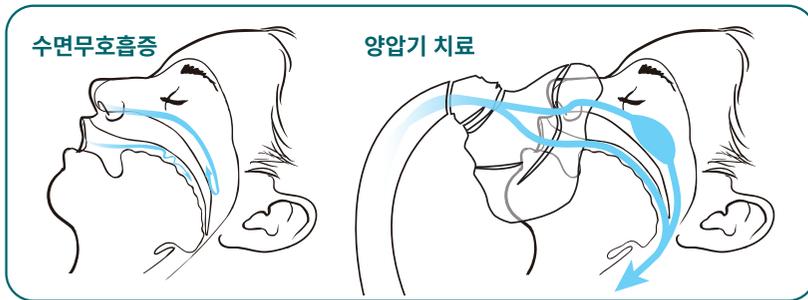

- + 코골이 방지
- + 만성질환 예방
- + 수면무호흡 개선
- + 주간 졸림증 개선

양압기치료 급여대상 품목 및 금액

급여대상품목		기준금액	본인 부담금 50% ^{-50%} 최초 처방전 적용 시	본인 부담금 20% ^{-80%} 두번째 처방전 이상 적용 시
양압기 임대료	지속형	76,000원/월	38,000원/월	15,200원/월
	자동형	89,000원/월	44,500원/월	17,800원/월
	이중형	126,000원/월	63,000원/월	25,200원/월
마스크		95,000원/1개/1년	19,000원/개	

순응도 평가

양압기 보험급여 지원을 받기 위해서는 순응도 평가 기준을 통과해야 합니다

순응도 평가 기준 (순응 중)

순응 기간 중 연속된 **30일 동안** 하루 **4시간 이상** 사용한 날이 **21일 이상**



순응도 평가 (순응 후)

월 평균 2시간 이상 사용 시 건강보험 지원 가능

* 순응도 평가 통과 후에는 최대 12개월마다 재처방전을 발급받으시면 건강보험 적용이 가능합니다

순응도 평가 기준에 미달되어 탈락할 경우 180일 이후 재도전 가능하며,
수면다원검사 후 1년이 지난 경우 재검사를 해야 합니다

국외여행 또는 업무로 해외출국 시 국외체류기간 동안 보험지원이 되지 않습니다
출국 시 고객센터 또는 담당매니저에게 연락바랍니다



마이숨 고객센터
1644 - 1537


양압기 사용방법

정확한 사용방법과 편의기능을 통해 양압기를 안전하고 편안하게 사용하세요.



장비구성

양압기 가방, 양압기 본체, 가습기, 가습기 물통, 전원 어댑터, 튜브, 마스크, WiFi 모뎀, SD카드, 일반필터, 미세필터로 구성되어 있습니다.

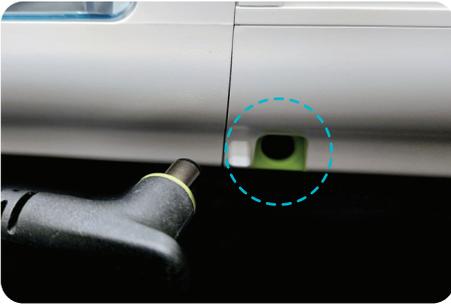


전원 연결하기

기기 하단에 있는 녹색 콘센트에 전원 코드를 연결합니다.



WiFi 모뎀 장착하기


기기 좌측면에 커버를 열고 WiFi 모뎀을 장착합니다.

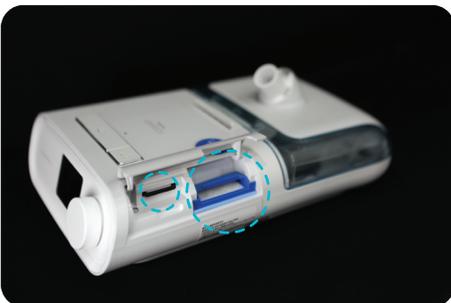

SD카드 및 필터 장착하기

기기 우측면에 커버를 열고 SD카드와 필터를 장착합니다.

*** 필터는 미세필터와 일반필터를 결합한 이후에 장착합니다.**

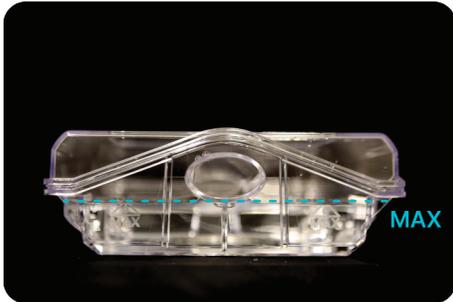

가습기 물통 물 채우기

가습기 물통에 물을 채워줍니다.
이때, 표시된 MAX선을 넘지 않도록 주의합니다.



가습기 물통 결합하기

가습기 물통을 가습기에 조심스럽게
장착하고 가습기 덮개를 완전히
덮습니다.



튜브와 마스크 연결하기

기기와 튜브를 연결하고 튜브 반대편에
마스크를 연결합니다.

*** 열선 튜브 사용 시, 단자에 맞게 장착합니다.**



양압기 사용하기

모든 과정이 완료 되었다면 마스크를
장착하고, 기기의 치료 버튼을 눌러
치료를 시작합니다.

양압기 본체 설명



스마트 램프 (Smart Ramp) 기능

드림스테이션 사용자가 잠들기 전에는 처방압력보다 낮은 압력을 제공하고, 잠이 든 이후에 처방된 압력까지 서서히 압력을 올려 초기 수면단계에서 불편함 없이 편하게 잠들 수 있도록 도와드립니다.

- 치료 버튼 옆에 있는 노란색 삼각형 버튼을 누르면 스마트 램프 기능이 활성화 됩니다.



양압기 메뉴 가이드

가습기 및 튜브온도를 조절을 통해 양압기를 안전하고 편안하게 사용하세요.



치료시작 버튼

기기 상단에 치료시작 버튼을 누른 후, 치료 중인 디스플레이 화면을 확인합니다.



튜브 온도 설정 (열선 튜브 사용 시)

다이얼을 돌리고 클릭하면 튜브의 온도 단계를 조절할 수 있습니다.
원하는 온도 단계를 설정하고 다시 한번 클릭합니다.



가습기 설정

다이얼을 돌리고 클릭하면 가습단계를 조절할 수 있습니다.
원하는가습단계를 설정하고 다시 한번 클릭합니다.

드림스테이션 세척법

올바른 세척 및 관리를 통해 건강하고 안전하게 양압기를 사용하세요

매일 세척



마스크 쿠션



일반 튜브



가슴기 물통

매주 세척



열선 튜브



헤드기어 및 프레임

매월 세척



일반필터

필터 교체주기

1개월 권장



미세 필터

6개월 권장



일반필터

세척 금지



본체



가슴기



미세필터

세척 시 주의사항

1. 세척 시, 강하게 비틀거나 털면 파손의 원인이 될 수 있습니다 (파손 시 무상 교체 주기 이외에는 유상교체로 진행됩니다)
2. 세척 시, 세제는 물 3.8L당 세제 5ml 이하로 사용해 주시기 바랍니다
3. 세척 후, 반드시 그늘에 건조하시고 직사광선 및 드라이기를 사용하여 건조하지 마시기 바랍니다

마스크 쿠션 세척



마스크와 마스크 쿠션을 분리하고 세제 물에 마스크 쿠션을 담가줍니다. 손을 사용하여 부드럽게 비벼 세척하고 세제 잔여물이 남지 않도록 흐르는 물에 여러번 헹구어 줍니다.

기어/프레임 세척



헤드기어와 프레임을 분리하고 세제 물에 헤드기어와 프레임을 담가줍니다. 세제 물이 묻은 헤드기어와 프레임을 꺼낸 후 손으로 부드럽게 비벼 세척합니다. 마지막으로 세제 잔여물이 남지 않도록 흐르는 물에 여러번 헹구어 줍니다.

가습기 물통 세척



세제 물에 가습기 물통을 담가줍니다. 가습기 물통을 손을 사용하여 부드럽게 비벼 세척하고 세제 잔여물이 남지 않도록 흐르는 물에 여러번 헹구어 줍니다.

열선 튜브 세척



세제 물에 열선 튜브를 담가줍니다. 열선 튜브 입구 부분을 손을 사용하여 세척하고, 세제물이 담긴 튜브를 흔들어 튜브 내부까지 세척합니다. 마지막으로 세제 잔여물이 남지 않도록 흐르는 물에 여러번 헹구어 줍니다.

일반필터 세척



일반필터와 미세필터를 분리하고 일반필터를 흐르는 물에 손을 사용하여 여러번 비벼 세척합니다.

*** 미세필터는 절대 세척하면 안됩니다.**



Sleep Better for a better life
고객센터 1644 - 1537



www.mekhealthcare.co.kr

03949, 서울시 마포구 모래내로7길 12 MEK빌딩 5층

All Rights Reserved ©

본 인쇄물의 권리는 맥헬스케어에 있으며

사전승인 없는 무단 도용을 금합니다.